

## ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОТИВОВАРИКОЗНЫЙ ТРИКОТАЖ VENOTEKS

Колготы, чулки и гольфы, применяемые для лечения, должны обладать одним важным свойством: оказывать правильно распределенное по ноге давление – максимальное в области лодыжек и постепенно ослабевающее к бедру, как показано на рисунке. Таким образом, лечебный противоварикозный трикотаж помогает возврату крови по венам к сердцу и легким.

Лечебный трикотаж VENOTEKS® THERAPY оказывает физиологически распределенную по ноге компрессию. Основа лечебного действия VENOTEKS® THERAPY – точно рассчитанное и дозированное давление на мягкие ткани ноги и опосредованно на стенки вен. Компрессионное воздействие трикотажа VENOTEKS® THERAPY вызывает следующие главные лечебные эффекты:


- сужает просвет вен, увеличивает скорость оттока венозной крови, предотвращая ее застой, и, таким образом, нормализует деятельность мышечно-венозной помпы;
- препятствует образованию тромбов;
- защищает ноги от отеков, усталости, боли.



Эти эффекты компрессионного трикотажа осуществляются за счет распределенного давления на вены, которое сужает их просвет и поддерживает клапаны, предотвращая обратный ток и помогая венозной крови подниматься от ног к сердцу.


### eXpressive 10-15 mm Hg

Профилактический трикотаж, предназначенный для использования здоровыми людьми, показан для предотвращения нарушений функции венозной системы, в частности отека лодыжек и стопы; он также показан для лечения целлюлита за счет своего массажного эффекта. В ассортименте VENOTEKS® Expressive – женские колготы, гольфы и чулки с ажурными деталями; мягкие и удобные мужские гольфы; специальные, не сдавливающие живот колготы для будущих мам.

Артикул	Описание	Размеры	Цвета	Плотность	Фото
138 for men	Гольфы мужские плотные	S, M, L, XL	Черный	380DEN	
12	Колготы для беременных прозрачные	S, M, L, XL, XXL	Черный, Бежевый	70DEN	
138	Гольфы женские плотные	S, M, L, XL	Черный	380DEN	

Артикул	Описание	Размеры	Цвета	Плотность	Фото
19	Гольфы для женщин прозрачные с плетением "JERSEY"	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	70DEN	
74	Чулки с ажурным верхом прозрачные	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Черный, Бежевый	70DEN	
75	Колготы для женщин прозрачные с плетением "JERSEY"	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Черный, Бежевый	70DEN	

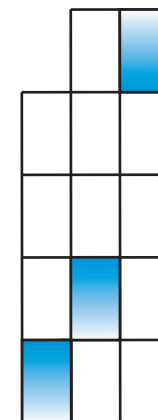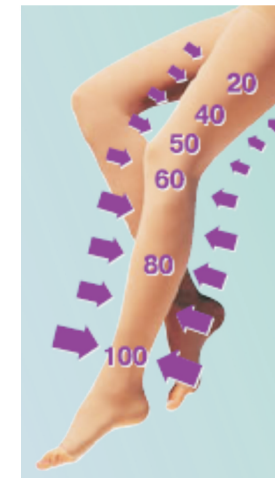

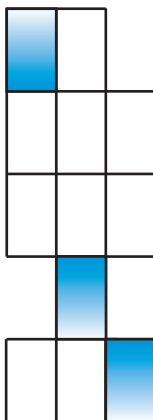

## Clinic 1 18-22 mm Hg

Лечебный трикотаж I класс компрессии (18–22 мм рт. ст).

Показания:

- Синдром «тяжелых ног».
- Профилактика варикоза у беременных.
- Отеки голеней и тяжесть в ногах к вечеру.
- Сосудистые «звездочки» и «паутинки» на коже ног.

Артикул	Описание	Размеры	Цвета	Плотность	Фото	Артикул	Описание	Размеры	Цвета	Плотность	Фото
169	Гольфы мужские с хлопком	S, M, L, XL	Черный	380DEN		209	Гольфы для женщин с микрофиброй плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	380DEN	
103	Гольфы мужские плотные	S, M, L, XL	Черный	380DEN		4	Чулки с ажурным верхом прозрачные	S, M, L, XL, XXL	Черный, Бежевый, Капуччино	380DEN	
26	Колготы для беременных прозрачные	S, M, L, XL, XXL	Черный, Бежевый, Капуччино	140DEN		15	Колготы для женщин прозрачные	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Черный, Бежевый, Капуччино	140DEN	
16	Гольфы для женщин прозрачные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый, Капуччино	140DEN		226	Колготы для беременных с микрофиброй	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	380DEN	
110	Гольфы для женщин плотные	S, M, L, XL	Черный, Кремовый	380DEN		208	Колготы женские с микрофиброй	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	380DEN	
168	Гольфы для женщин плотные с хлопком	S, M, L, XL	Черный, Кремовый	380DEN							

Clinic 2 23-32 mm Hg


Лечебный трикотаж II класс компрессии (23–32 мм рт. ст).


Показания:

- Варикозная болезнь без трофических расстройств.
- Состояние после склеротерапии или флебэктомии.
- Профилактика тромбоза глубоких вен в группах риска.
- Острый тромбофлебит.

Артикул	Описание	Размеры	Цвета	Плотность	Фото
201 for men	Гольфы для мужчин с открытым носком плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	470DEN	
205 for men	Чулки для мужчин с силиконовым фиксатором плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	470DEN	
102	Гольфы для мужчин плотные	S, M, L, XL	Черный	430DEN	
111	Гольфы для мужчин с хлопком плотные	S, M, L, XL	Черный	430DEN	
127	Гольфы для мужчин с микрофиброй плотные	S, M, L, XL	Черный, Кремовый	430DEN	
200 for men	Гольфы для мужчин плотные	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Черный, Бежевый	470DEN	

Артикул	Описание	Размеры	Цвета	Плотность	Фото
207	Чуллок на одну ногу плотный	S, M, L, XL	Черный	470DEN	
202 for men	Чулки для мужчин с силиконовым фиксатором с открытым носком плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	470DEN	
203	Колготы для мужчин плотные	S, M, L, XL, XXL	Черный	470DEN	
34	Колготы для беременных прозрачные	S, M, L, XL, XXL	Черный, Бежевый, Капуччино	140DEN	
206	Колготы для беременных плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	470DEN	
18	Гольфы для женщин прозрачные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	140DEN	

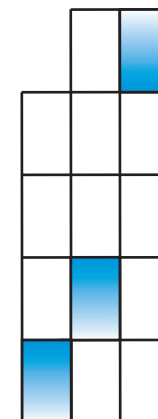

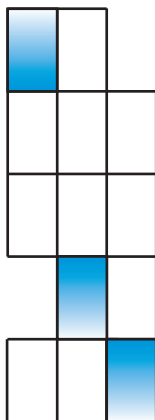

## Clinic 2 23-32 mm Hg

Артикул	Описание	Размеры	Цвета	Плотность	Фото
212	Гольфы для женщин с микрофиброй плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	430DEN	
119	Гольфы для женщин с микрофиброй с открытым носком	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	430DEN	
8	Чулки с ажурным верхом прозрачные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	140DEN	
128	Чулки с ажурным верхом с микрофиброй плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	430DEN	
33	Колготы для женщин прозрачные	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Черный, Бежевый, Капуччино	140DEN	

Артикул	Описание	Размеры	Цвета	Плотность	Фото
234	Колготы для женщин с микрофиброй плотные	S, M, L, XL, XXL	Черный, Бежевый	430DEN	
200	Гольфы для женщин плотные	S, M, L, XL, XXL, XXXL	Черный, Бежевый	470DEN	
201	Гольфы для женщин с открытым носком плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	470DEN	
204	Чулки для ношения с поясом плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	470DEN	
205	Чулки для женщин с силиконовым фиксатором плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	470DEN	
202	Чулки для женщин с силиконовым фиксатором с открытым носком плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	470DEN	

Clinic 3 34-46 mm Hg


Лечебный трикотаж III класс компрессии (34–46 мм рт. ст).


Показания:

- Варикозная болезнь с трофическими расстройствами.
- Посттромбофлебитическая болезнь.
- Лимфовенозная недостаточность.
- Тромбоз глубоких вен.

Артикул	Описание	Размеры	Цвета	Плотность	Фото
<b>300 for men</b>	Гольфы для мужчин плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	520DEN	
<b>301 for men</b>	Гольфы для мужчин с открытым носком плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	520DEN	
<b>315 for men</b>	Чулки для мужчин с силиконовым фиксатором плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	520DEN	
<b>305 for men</b>	Чулки для мужчин с силиконовым фиксатором с открытым носком плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	520DEN	
<b>300</b>	Гольфы для женщин плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	520DEN	
<b>301</b>	Гольфы для женщин с открытым носком плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	520DEN	

Артикул	Описание	Размеры	Цвета	Плотность	Фото
<b>304</b>	Чулки для женщин для ношения с поясом	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	520DEN	
<b>315</b>	Чулки для женщин с силиконовым фиксатором плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	520DEN	
<b>305</b>	Чулки для женщин с силиконовым фиксатором с открытым носком плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	520DEN	
<b>303</b>	Колготы для женщин плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	520DEN	
<b>307</b>	Колготы для женщин с открытым носком плотные	S, M, L, XL	Черный, Бежевый	520DEN	

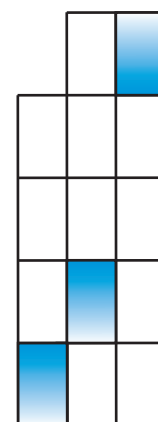

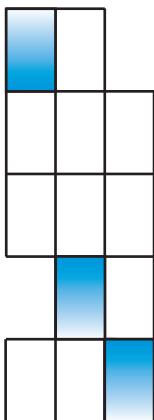

### Hospital antiembolism 18-22 mm Hg

Госпитальный противоземблический трикотаж I класс компрессии (18–22 мм рт. ст).

Профилактика тромбоза и эмболии сосудов:

- при родах и в послеродовом периоде в роддоме,
- при оперативных вмешательствах,
- при длительной неподвижности больных на постельном режиме после инсультов, инфарктов, ожогов, травм, переломов шейки бедра и др.

Артикул	Описание	Размеры	Цвета	Фото
400	Гольфы с открытым носком	S, M, L, XL	Белый	
401	Чулки с открытым носком и силиконовым фиксатором	S, M, L, XL	Белый	
402	Чулки с поясом и открытым носком	S, M, L, XL	Белый	

### Hospital lymphedema 23-32 mm Hg

Противоотечные рукава II класс компрессии 26–32 мм рт. ст.

Показания:

- Состояние после мастэктомии (удаление молочной железы).
- Первичная лимфэдема (врожденные аномалии лимфатической системы).
- Длительное ограничение подвижности руки (последствия травм, операций, глубоких ожогов).

Артикул	Описание	Размеры	Цвета	Фото
500	Рукав противоотечный	S, M, L, XL	Бежевый	



# ПОДБОР РАЗМЕРОВ VENOTEKS

Подбор женских гольфов и чулок, женских колгот и колгот для беременных

Артикулы №№ 4, 15, 16, 26, 110, 119, 128, 168, 208, 209, 212, 226, 234						
Размер	a (см)	b (см)	c (см)	g (см)	Т (женские колготы) (см)	A-G (см)
S	34 - 36	16 - 21	26 - 36	43 - 57	до 72	70 - 97
M	36 - 39	21 - 24	30 - 41	45 - 64	до 90	
L	38 - 42	23 - 26	33 - 45	50 - 70	до 100	
XL	40 - 43	25 - 28	36 - 43	56 - 72	до 110	
XXL	40 - 43	27 - 32	37 - 46	58 - 77	до 120	
XXXL	40 - 43	30 - 36	39 - 49	60 - 81	до 130	
Артикулы №№ 8, 18, 33, 34						
Размер	a (см)	b (см)	c (см)	g (см)	Т (женские колготы) (см)	A-G (см)
S	34 - 36	16 - 20	26 - 34	38 - 56	до 72	70 - 97
M	36 - 38	20 - 24	29 - 40	45 - 61	до 85	
L	38 - 40	24 - 28	33 - 45	50 - 65	до 95	
XL	40 - 42	28 - 33	36 - 43	56 - 70	до 100	
XXL	40 - 42	33 - 36	37 - 46	58 - 72	до 110	
XXXL	40 - 43	30 - 36	39 - 49	60 - 75	до 120	

Подбор женских и мужских гольфов, чулок и колгот


Артикулы №№ 200, 201, 202, 203, 203 (для мужчин), 204, 205, 206, 207, 300, 301, 303, 304, 305, 307, 315						
Размер	b (см)	c (см)	f (для чулок) (см)	Т (арт. 203, 207) (см)	A-D (для гольфов) (см)	A-F (для чулок) (см)
S	17 - 21	28 - 35	40 - 54	до 70	30 - 60	70 - 97
M	20 - 25	32 - 44	45 - 60	80 - 90		
L	23 - 28	38 - 46	50 - 65	85 - 95		
XL	26 - 30	40 - 48	55 - 70	90 - 10		
XXL	28 - 36	42 - 50	60 - 74	58 - 72		

Подбор женских гольфов



Артикулы №№ 138, 19				
Размер	a (см)	b (см)	c (см)	A-D
S	35 - 38	16 - 21	28 - 38	35 - 58
M	36 - 40	21 - 24	29 - 42	
L	38 - 42	24 - 28	33 - 46	
XL	39 - 43	28 - 33	36 - 51	

## ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ

- Т - окружность талии
- Н - окружность бедер
- g - окружность ноги ниже промежности на 5 см
- f - окружность середины бедра
- d - окружность под коленной чашечкой (два пальца ниже коленного сустава)
- c - окружность икры
- a - размер стопы
- b - окружность надлодыжечной области (самая тонкая часть ноги)
- A-F - длина от точки f до пятки
- A-D - длина от точки d до пятки
- A-G - длина от точки g до пятки

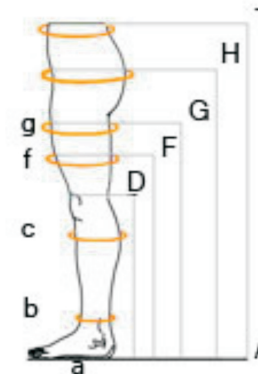

Подбор колгот для беременных Арт. 12

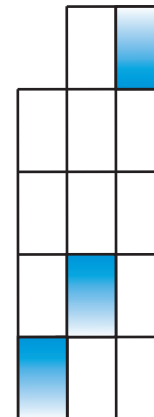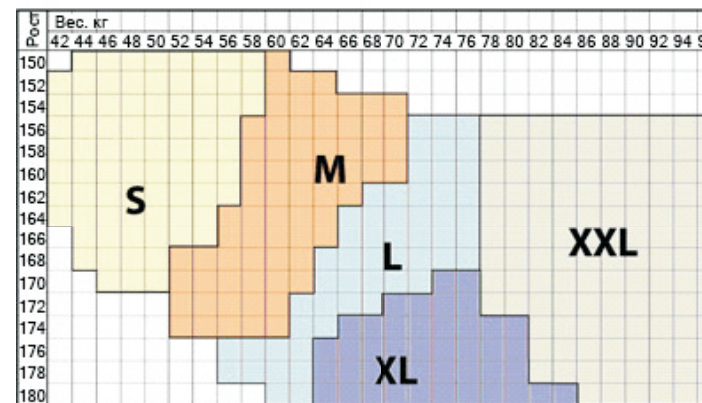


## Подбор мужских гольфов

Артикулы №№ 102, 103, 111, 127, 169				
Размер	a (см)	b (см)	c (см)	A-D
S	38 - 40	20 - 23	30 - 37	28 - 58
M	39 - 42	22 - 26	32 - 43	
L	40 - 44	24 - 28	35 - 47	
XL	43 - 46	26 - 32	38 - 50	
XXL	43 - 46	30 - 36	41 - 52	
Артикул №138				
Размер	a (см)	b (см)	c (см)	A-D
S	37 - 38	19 - 21	30 - 38	28 - 58
M	38 - 42	21 - 24	31 - 43	
L	42 - 44	24 - 28	35 - 47	
XL	44 - 46	28 - 33	38 - 51	

## Подбор противоэмболических гольфов, чулок и чулок с поясом

Размер	Для всех изделий группы	Гольфы арт. 400		Чулки арт. 401 и 402	
	b	c	A-D	g	A-G
S	17 - 22	32 - 38	до 40	45 - 64	74 - 79
M	20 - 24	33 - 44	до 43	53 - 71	
L	23 - 28	37 - 46	до 46	61 - 80	
XL	26 - 32	45 - 50	до 48	более 75	

## Подбор женских чулок Арт. 74

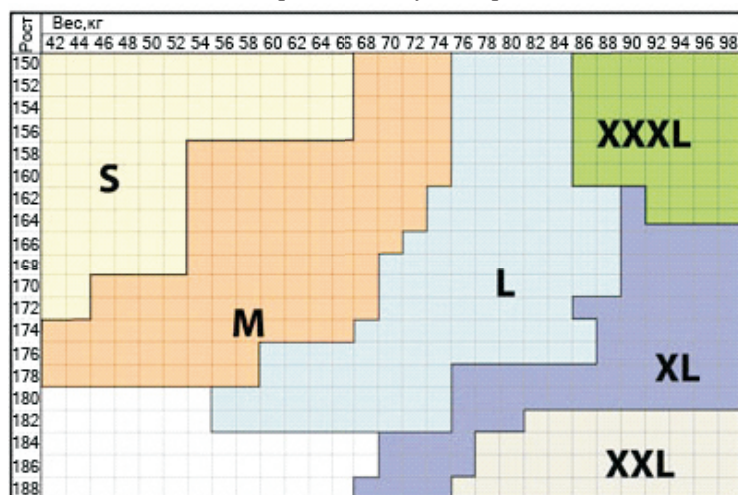

## Подбор женских колгот Арт. 75

